

universal S-pluriBead® anti-hu

Order No.:31-RBaHU-10



Beschreibung

Neben einem breiten Spektrum an verschiedenen standardisierten pluriBeads®, ermöglichen unsere universellen pluriBeads® die Verwendung von eigenen spezifischen Antikörpern. Durch die Kopplung Ihres spezifischen Antikörpers an die universellen pluriBeads®, können Sie einfach, eigene funktionalisierte Fängerpartikel für die positive Isolation von Zellen oder biologischen Zielen herstellen (Abb.1). Universal S-pluriBeads® anti-human sind für die Kopplung von Antikörpern, die in Mensch (Wirtspezies) hergestellt wurden, geeignet. Universal S-pluriBead® anti-human sind mit Sekundärantikörpern markiert, die Primärantikörper aus Mensch (Wirt) erkennen. Nachdem Sie die universal pluriBead® mit ihrem eigenen Antikörper gelabelt haben, fahren Sie mit dem üblichen pluriBead® Zellisolationsprotokoll fort.

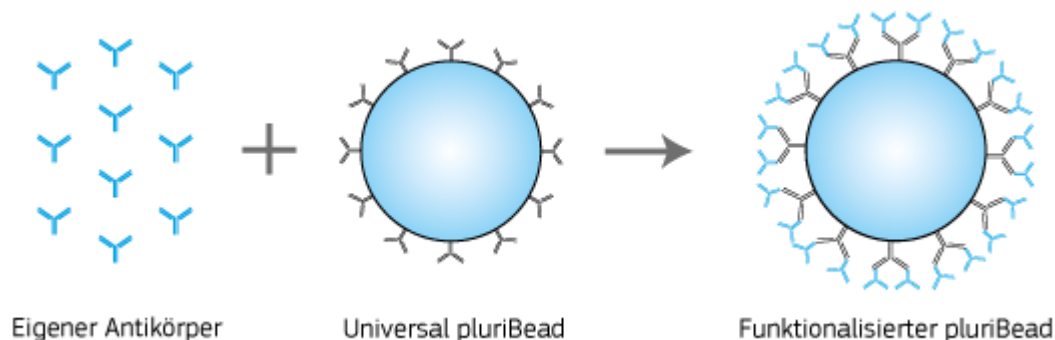


Abb. 1: Schematische Darstellung der Funktionalisierung von universal S-pluriBead® anti-human mit einem eigenen spezifischen Antikörper

Reaktivität der universal S-pluriBead® anti-human: Mensch

Erforderliche Primärantikörper aus: Mensch

Wirt (Host) gekoppelter Sekundärantikörper: Kaninchen

Typ gekoppelter Sekundärantikörper: polyklonal

Alle notwendigen Puffer und Verbrauchsmittel, für die schnelle Zellanreicherung mit universal S-

pluriBeads®, finden Sie hier:

S-pluriBead® Mini Reagent Kit

S-pluriBead® Maxi Reagent Kit

Additional Information

Lieferumfang	2 ml
Spezies	Mensch
Zelltypen	Jegliche Zellen
Probenmaterial	Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Nabelschnurblut, Knochenmark, primäre Zelllösung
Reinheit	>90%
Lagerbedingungen	4-8 °C
Regulierungserklärung	Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.